


GPC分析 - 結果

・結果チャートには、①～③が記載される

【検出結果：まとめ】

① サンプルのクロマトグラムと校正曲線の重ね書き

まとめ

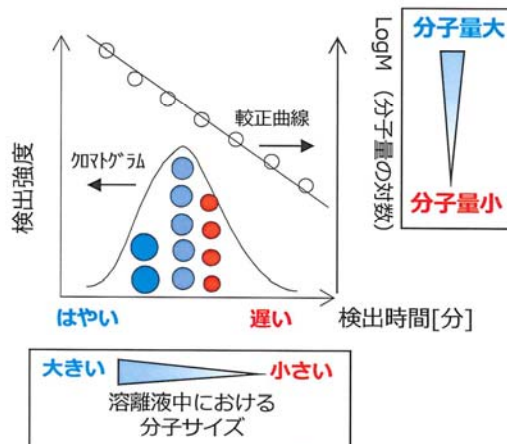


解析


【解析結果】※解析結果は、標準物質換算の相対値（相対平均分子量と呼ばれる）となる。

② 分子量分布曲線（結果チャートには、下記2曲線の重ね書きが表示）

・微分分子量分布曲線

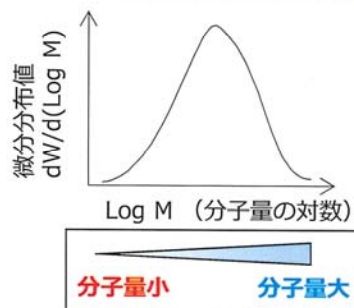

・積分分子量分布曲線

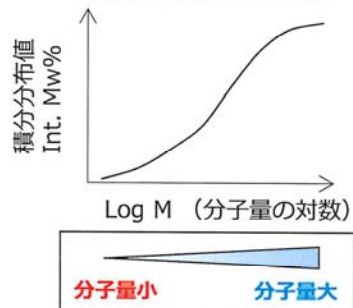

③ 平均分子量

- ・ Mn (数平均分子量)
- ・ Mw (重量平均分子量)
- ・ Mw/Mn (多分散度)

など平均数値化